

MARUTAKA HAND

Руководство по использованию
массажера для рук Marutaka Hand



Пневма-
тический
массаж



Наличие
аккумуля-
тора



Функция
термо-
нагрев



Настройка
таймера



Регулировка
интенсив-
ности

Благодарим вас за покупку
массажера для рук MARUTAKA HAND.

Перед началом работы с изделием
внимательно ознакомьтесь с инструкцией
и правилами техники безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|--|--|
| 1. Знакомство с аппаратом | 7. Меры предосторожности |
| 2. Способ применения | 8. Уход и хранение |
| 3. Рекомендации по применению | 9. Прочие меры предосторожности |
| 4. Управление кнопками | 10. Технические характеристики |
| 5. Особенности товара | 11. Точки массажа на ладони |
| 6. Правила техники безопасности | 12. Гарантийный талон |
-

1. ЗНАКОМСТВО С АППАРАТОМ



① Панель управления

② Выход (место выхода пальцев)

③ Разъем для питания
Вход для руки

④ Шнур для зарядки

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Поместите руку в массажер ладонью вниз.
2. Совместите круглую массажную зону с серединой ладони.
3. Нажмите кнопку включения, чтобы запустить работу массажера.
4. Укажите пол при помощи кнопок мужчина/женщина.
(Если пропустить данный этап, то аппарат автоматически выключится.)
5. Настройте интенсивность массажа с помощью кнопки MODE (L<слабый>, M<средний>, H<сильный>)
6. Настройте время кнопкой TIME. (Настройка по умолчанию – 5 минут)
7. При желании можете использовать функцию нагрева, нажав на соответствующую кнопку.
8. По истечении запрограммированного времени, аппарат выключается автоматически.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ▷ Если не указать пол после включения, то через 5 секунд аппарат автоматически выключается
- ▷ Возможно использование во время зарядки аппарата.
- ▷ При подключении к сети отображается процесс зарядки.
(Во время зарядки мигает индикатор, после полной зарядки он перестаёт мигать)
- ▷ Время для полной зарядки аккумулятора – 4 часа.
Продолжительность работы при полной зарядки – до 2 часов.
- ▷ Если во время использования аппарата хотите перезапустить его, то подождите, пока весь воздух не выпустится с аппарата.
- ▷ Благодаря небольшой массе массажера (700 г) можно перемещаться во время использования аппарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ▷ Раны или воспаление на руке
- ▷ Состояние организма, при котором противопоказан массаж
- ▷ Кожные заболевания

4. УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

- ① Кнопка включения
- ② Выбор пола
- ③ Настройка интенсивности
- ④ Термо - нагрев
- ⑤ Установка времени



5.ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА



1

2

3

4

5

6

7

1 - Функция термо-нагрева

При нагреве эффект от массажа повышается

2 - Сильно пневмо-компрессионное давление

Доступны 6 режимов уровня давления (L,M,H - мужской/женский)

3 - Акупунктуроподобный эффект

Запатентованная технология массажа, в основе которой лежат принципы Судзи-акупунктуры

4 - Массаж запястья

Благодаря открытой передней части в аппарат можно поместить запястье

5 - Удобное управление

Благодаря простоте управления возможно использование лицами от 14 лет

6 - Заряжаемый аккумулятор

Удобное перемещение без проводов

7 - Лёгкость/мобильность

Устройство доступно всегда, везде и всем благодаря легкому весу.

Компактный и портативный аппарат, удобно перемещаться с ним

Советы. Рекомендуем пользоваться массажером, если у вас:

Отечность рук	Пониженное артериальное
Проблемы с кровообращением	давление, или гипотония
Сухость и потеря упругости	Восстановление после инсульта
кожи рук	Онемение рук и пальцев
Синдром холодных рук	Судороги рук
Напряжение, мышечные спазмы	Артрит, артроз пальцев
Хронический стресс, усталость	Паралич рук
Повышенная утомляемость	

6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для наилучшего результата длительность процедуры должна составлять 15 минут.
2. Если вы используете аппарат дольше, чем 15 минут за один сеанс, может возникнуть перенапряжение нервов и мышц, вызывающие нежелательные последствия.
3. Рекомендуемое время использования аппарата – 30 минут в день (15 минут утром и 15 минут вечером)
4. При повреждении вилки зарядного кабеля остановите работу аппарата и сразу же обратитесь в сервис-центр нашей компании.
5. Не помещайте другие части тела или вещи в массажер.
6. Не кладите тяжёлые вещи на устройство.
7. Не разбирайте аппарат по своему усмотрению.
(Может привести к поломке или несчастным случаям.)
8. При подозрении на повреждение аппарата сразу же остановите его работу. Свяжитесь с продавцом или производителем.
9. Храните аппарат в месте, недоступном для детей и людей с затрудненной коммуникацией. Нельзя использовать детям до 14 лет.
10. Пожилым людям перед использованием необходима консультация врача.
11. При возникновении боли во время пользования аппаратом сразу же прекратите использование и следуйте указаниям врача.

Совет. Попробуйте использовать так!

Попробуйте использовать аппарат, надев целлофановые перчатки после нанесения крема. Это способствует улучшению впитывания крема и поможет следить за здоровьем кожи рук.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте аппарат не по назначению.
2. Не пользуйтесь аппаратом во влажных местах, в ванной, рядом с огнем и пр.
3. Оптимальное время использования – 15 минут.
4. Не нажимайте сильно на кнопки. Не пользуйтесь аппаратом, укутав его в полотенце, одежду и пр. (Может стать причиной поломки.)
5. Людям с заболеваниями, связанными с кистью рук, аллергическими, онкологическими, сердечно-сосудистыми, психогенными и другими заболеваниями, с высоким артериальным давлением, эпилепсией, а также пациентам после недавней операции и беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.

8. УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Удалите с поверхности пыль и храните в сухом месте.
2. Во избежание повреждений не подпускайте к аппарату домашних питомцев при его хранении.
3. Не оставляйте аппарат под воздействием прямых солнечных лучей, рядом с источником открытого огня и разогретой поверхностью.
4. После каждого применения обязательно отсоедините сухими руками аппарат от сети.


9. ПРОЧИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте массажер во время сна.
2. Не используйте аппарат после приёма алкогольных напитков или снотворного средства.
3. Не используйте аппарат непрерывно дольше 30 минут.
4. Не пользуйтесь поврежденным аппаратом.
5. Не роняйте массажер.
6. Если аппарат вызывает зуд при его использовании, то приостановите использование, обратитесь к врачу и следуйте его указаниям.
7. При резком переходе из зоны низкой температуры в зону высокой возможны неполадки в работе устройства или его поломка из-за влажности. Во избежание подобных случаев перед использованием оставьте аппарат на 2 часа при комнатной температуре.
8. При обнаружении поломки или неполадок в работе аппарата обратитесь в сервисный центр.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие	Массажёр для рук	Время зарядки	Максимум 4 часа
Модель	Marutaka Hand	Номер сертификата об электромагнитной совместимости	R-RE-MV5-MVP-5501
Потребляемая мощность	7.5 Вт	Габариты	250x150x108
Номинальное напряжение	110В-240В DC 5В, 1.5А	Номер сертификата о безопасности	SU10602-16001B
Продолжительность аккумулятора	до 2 часов подряд	Масса	700 г

11. ТОЧКИ МАССАЖА НА ЛАДОНИ

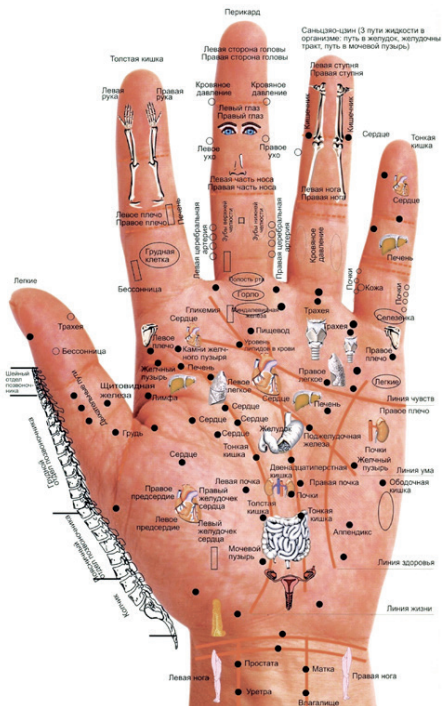

Профилактика всевозможных заболеваний и улучшение самочувствия!